



## Tips voor het correct instellen van de Phonak Phone DECT (CP1 v2) bij gebruikers van een AB Naída CI Q70 en AB Naída CI Q90

Voorwaarden om de Phonak DECT Phone CP1 v2 te kunnen gebruiken:

1. De processor moet voorzien zijn van de nieuwste firmware (d.m.v. Soundwave 2.3).
2. ComPilot streaming moet in het desbetreffende programma ingeschakeld zijn (door CI-team).
3. De compatibiliteit 'AB' moet bij de instellingen van de DECT Phone CP1 v2 gekozen worden.



1. Druk op de OK toets
2. kies de instelling 'Hoortoestel'




5. Verander de Modus van < normaal > naar < AB >
6. Selecteer 'Opslaan'

Opmerking:  
De Modus < AB > streamt ook naar een compatibel Phonak hoortoestel.



3. Selecteer 'Compatibiliteitsinfo'

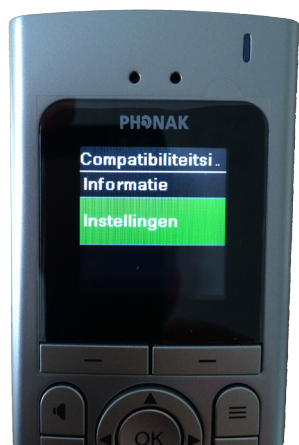

4. Selecteer 'Instellingen'



Ter informatie: de versie van de Phonak DECT CP1 staat weergegeven op een sticker onder de accu




## Tips voor het correct instellen van de Phonak EasyCall bij gebruikers van een AB Naída CI Q70 en AB Naída CI Q90

### Hoe te gebruiken

EasyCall werkt direct vanuit de verpakking. Éénmaal aangesloten op de telefoon, is het altijd klaar voor gebruik.

Voordat u de EasyCall voor het eerst met een mobiele telefoon gebruikt, moeten deze apparaten eerst aan elkaar gekoppeld worden. Zorg ervoor dat de EasyCall en de mobiele telefoon zich binnen 1 meter afstand van elkaar bevinden.

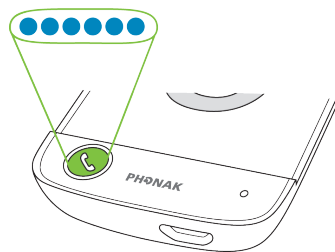

Koppelmodus (pairing mode)


Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon. Als de EasyCall nog nooit gekoppeld is, dan staat deze automatisch in de koppelmodus na het inschakelen. Dit wordt aangegeven door een snel blauw knipperend indicatorlampje (zie afbeelding).

Voor het handmatig opstarten van de koppeling op de EasyCall, houdt u gedurende 10 seconden de belknop ingedrukt tot het indicatorlampje snel blauw begint te knipperen.

Start het koppelproces op de telefoon binnen 1 minuut, zoals in de gebruiksaanwijzing van de telefoon staat vermeld. Op uw telefoon wordt een lijst met gevonden Bluetooth-apparaten weergegeven. Kies voor 'Phonak EasyCall' in de lijst en voer de code '0000' in indien dit wordt gevraagd.

### Koppeling voltooien

Als het koppelen is gelukt, stopt het indicatorlampje van de EasyCall met snel blauw knipperen. Dit kan tot 2 minuten duren, maar duurt gewoonlijk niet langer dan enkele seconden. De telefoon hoeft slechts eenmaal gekoppeld te worden. Na uitschakeling blijft deze gekoppeld.

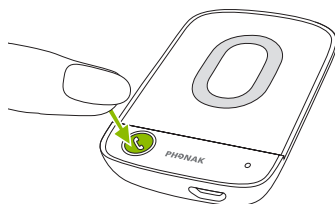

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u gewoon de EasyCall knop, houdt u de telefoon met de EasyCall bevestigd binnen 25 cm van de hoortoestellen en ervaar de binaurale spraakwaliteit.

### Bevestigingsopties

Voor het beste resultaat, bekijk de beschikbare Phonak hard cases voor sommige populaire telefoon modellen.


Indien u geen Phonak hard case gebruik voor de bevestiging van de EasyCall wordt EasyCall gemonteerd op de achterzijde van de telefoon door middel van dubbelzijdig tape, wat in de verpakking wordt meegeleverd.

Let op: De EasyCall nooit over een opening plaatsen (e.g. camera lens, microfoon, speaker) als u deze op de telefoon plaatst!

### Phonak EasyCall – hard case

Voor sommige populaire mobiele telefoon modellen biedt Phonak toegewezen hoesjes. Hierdoor is de EasyCall perfect te plaatsen op de achterkant van de telefoon zonder gebruik te maken van de dubbelzijdige tape.

Telefoon model	Hard case model artikel nummer
Apple iPhone 5/5S	004-8446
Apple iPhone 6	004-8447
Samstung Galaxy S5	004-8448
Samsung Galaxy S4-mini	004-8449

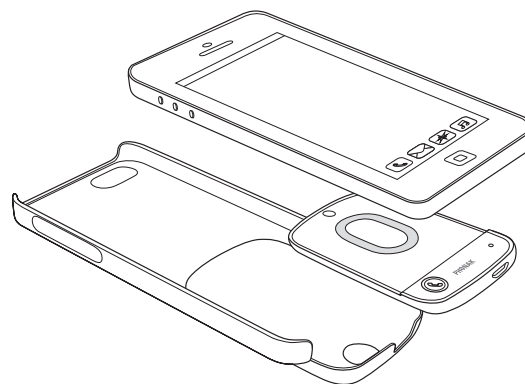

Als het model dat u nodig heeft niet in de lijst staat, gebruikt u de dubbelzijdige tape die bij de EasyCall geleverd wordt.